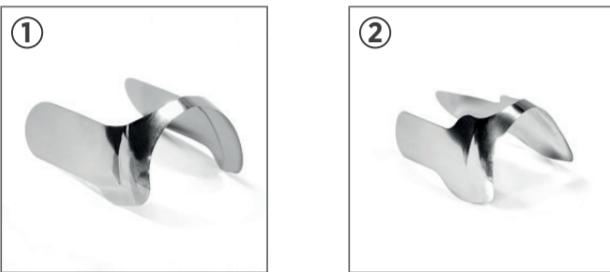
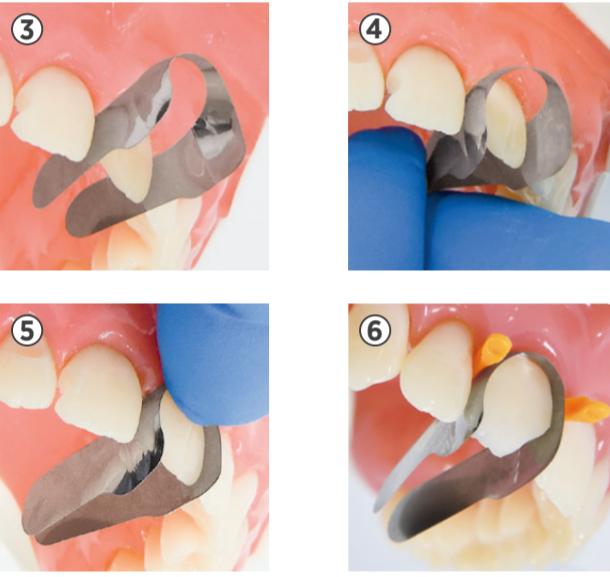


unica introkit

in cooperation with **STYLE ITALIANO™****matrix**
systems

MO2215 - REV 00 03.2024

Select Unica matrices**How to position Unica matrices****Tips and tricks**

polydentity
swiss manufacture

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03
info@polydentity.ch
www.polydentity.ch

**en - ENGLISH****Matrix Systems**

All individual components are CE marked

Medical Devices Kit for professional use only

Instructions for use**Description**

Unica anterior and Unica minideep anterior, thanks to their contoured shape, adapt correctly to the different morphologies of anterior teeth and are intended to restore interproximal and cervical margins at once, even in presence of rubber-dam or gingival retraction cords, reducing chair time significantly. Furthermore, Unica anterior and Unica minideep anterior matrices, once positioned, allow to easily visualize the final shape of the restoration. Unica anterior & Unica minideep anterior allow to: restore both proximal and cervical margins at once, anatomically restore the proximal margins thanks to its contoured profile, easily manage the cervical area.

Composition

Unica anterior & Unica minideep anterior: stainless steel myWedge: thermoplastic | myQuickmatrix Forceps: stainless steel.

Indications

Unica anterior introkit is indicated for: class III cavity restorations, class IV cavity restorations, class V cavity restorations, direct stratification composite veneers, shape modifications.

Contraindications

None known.

Side effects

There are no known side effects. Promptly report any serious incident by contacting your distributor or Polydentity.

Interactions with other medical devices or products

There are no known interactions.

Information for the patient

No information for the patient related to Unica anterior Introkit is necessary.

Preservation and storage

Store in a clean, dry environment away from moisture or excessive humidity.

Warnings

Due to the presence of small and sharp components, the use of a rubber dam is mandatory to avoid accidental ingestion or aspiration. In case of accidental ingestion of a Unica anterior Introkit component, it is strongly recommended seeking for medical assistance and locate the ingested components. If illness develops after ingestion, consult a doctor immediately. All Polydentity reusable Products are supplied non-sterile and must be appropriately disinfected, cleaned and sterilized before the first use. Please refer to the Cleaning, disinfection and Sterilization Instructions at www.polydentity.ch.

Disposal

Because of their composition, matrices and wedges can not be sterilized and are therefore single use devices. Do not reuse them. Properly dispose devices contaminated with potentially infectious substances of human origin, in accordance with local regulations.

Application

Select Unica matrices: Choose Unica according to its shape and the tooth to be restored. ① Select Unica anterior for: maxillary central incisors, maxillary lateral incisors, canine teeth. ② Select Unica minideep anterior for: maxillary and mandibular laterals, mandibular central incisors, conoid teeth, triangular teeth, peg laterals, teeth with narrow cervical diameter.

How to position Unica matrices: ③ Use the placement wings to insert Unica proximally. In case of tight contact surfaces, insert one wing at a time. ④ Gently pull the matrix palatally by its placement wings. ⑤ Push the cervical connection into the gingival sulcus. ⑥ Insert myWedge to fix the matrix in position.

Tips and tricks: Secure Unica matrices in place with a liquid dam, in case a wedge risks displacing or deforming the matrix. ⑦ Yes. ⑧ No.

de - DEUTSCH**Matrizenysteme**

Alle Einzelkomponenten sind CE-gekennzeichnet

Medizinprodukte-Set nur für den professionellen Gebrauch

Gebrauchsanweisung**Beschreibung**

Unica anterior und Unica minideep anterior passen sich dank ihrer geschwungenen Form an die verschiedenen Morphologien der Frontzähne an und sind für die gleichzeitige Restaurierung der approximalen und zervikalen Ränder geeignet, selbst bei Vorhandensein von Kofferdamen oder Gingivale-Retraktionsfäden, was die Behandlungszeit erheblich reduziert. Darüber hinaus ermöglichen Unica anterior und Unica minideep anterior Matrizen nach ihrer Positionierung eine einfache Visualisierung der endgültigen Form der Restoration. Unica anterior & Unica minideep anterior ermöglichen Folgendes: Gleichzeitige Restaurierung der approximalen und zervikalen Ränder. Anatomische Restaurierung des zervikalen Bereichs. Einfaches Arbeiten im zervikalen Bereich.

Zusammensetzung

Unica anterior & Unica minideep anterior: Edelstahl | myWedge: Thermoplast myQuickmatrix Forceps: Edelstahl.

Indikationen

Unica anterior Introkit ist für: Restaurierungen von Klasse-III-Kavitäten, Restaurierungen von Klasse-IV-Kavitäten, Restaurierungen von Klasse-V-Kavitäten, Direkt geschichtete Komposit-Verbindungen, Formmodifikationen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Melden Sie Ihrem Händler oder Polydentity jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Anwendung des Produkts. Wechselwirkungen mit anderen medizinischen Vorrichtungen oder Produkten Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Information für Patienten

Der Patient braucht nicht über Unica anterior Introkit aufgeklärt zu werden.

Aufbewahrung und Lagerung

In einer sauberen, trockenen Umgebung lagern und vor Nässe oder übermäßiger Feuchtigkeit schützen.

Warnhinweise

Aufgrund der vorhandenen kleinen und scharfen Bestandteile ist die Anwendung von Kofferdam zwingend erforderlich, um ein versehentliches Verschlucken oder Eintragen zu verhindern. Im Falle des Auftretens einer akuten Entzündung kann der Kofferdam zwangsläufig entfernt werden. Kontaminierte Produkte sind als potenziell infektiöse Agenzen menschlichen Ursprungs entsprechend den lokal geltenden Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.

Anwendung

Auswahl der Unica-matrizen: Wählen Sie Unica anhand ihrer Form und des zu restaurierenden Zahns aus. ① Wählen Sie Unica anterior für: Obere mittlere Schneidezähne. ② Wählen Sie Unica minideep anterior für: Obere und untere Sez Zahne. Untere mittlere Schneidezähne, Kondizähne, Dreieckszähne, Zahnformige Zähne, Zähne mit schmalen zervikalen Durchmessern.

Positionierung der Unica-matrizen:

③ Verwenden Sie die Platzierungsfügel, um Unica approximal einzusetzen. Sie ist im Falle von engen Kontaktflächen jeweils nur einen Flügel ein. ④ Ziehen Sie die Zervikale Verbindung in den Sulcus gingivale. ⑤ Drücken Sie die zervikale Verbindung in den Sulcus gingivale. ⑥ Setzen Sie myWedge ein, um die Matrix in ihrer Position zu fixieren.

Tips and tricks: Sicher Unica-Matrizen in ihrer Position mit einem flüssigen Kofferdam, wenn durch einen Keil das Risiko einer Verschiebung oder Verformung der Matrix besteht. ⑦ Ja. ⑧ Nein.

fr - FRANÇAIS**Systèmes Matriciels**

Tous les composants individuels sont marqués CE

Kit de dispositifs médicaux à usage professionnel uniquement

Mode d'emploi**Description**

Grâce à leur forme bombée, Unica anterior et Unica minideep anterior s'adaptent correctement aux différentes morphologies des dents avant : elles sont conçues pour restaurer les marges interproximales et cervicales en une seule fois, même en présence d'une digue en caoutchouc ou de cordes de rétraction gingivale, ce qui réduit le temps passé sur le fauteuil. De plus, lorsqu'elles sont posées, les matrices Unica anterior & Unica minideep anterior permettent de visualiser aisément la forme finale de la restauration. Unica anterior & Unica minideep anterior permettent de : Restaurer les marges proximales et cervicales en une seule fois. Restaurer de manière anatomique les marges proximales grâce à leur contour bombé. Gérer aisément la zone cervicale.

Composition

Unica anterior & Unica minideep anterior: acero inoxidable | myWedge: termoplástico myQuickmatrix: acero inoxidable.

Indications

Unica anterior introkit est indicado pour les : restaurations de cavités de classe III, restaurations de cavités de classe IV, restaurations de cavités de classe V, facettes en composite de stratification directe, modifications de forme.

Contre-indications

Néant.

Effets secondaires

On ne compte aucun effet secondaire connu. Prière de signaler rapidement tout incident sérieux en contactant le distributeur ou Polydentity.

Interactions avec d'autres dispositifs ou produits médicaux

Aucune interaction n'est connue.

Informations pour le patient

Aucune information à propos de Unica anterior Introkit n'est nécessaire pour le patient.

Conservation et stockage

Conserver dans un environnement propre et sec à l'abri de l'humidité ou d'une humidité excessive.

Avvertissements

En raison de la présence de petits éléments pointus, l'usage d'une digue dentaire en caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle. En cas d'aspiration accidentelle d'un composant de Unica anterior Introkit, consulter immédiatement un professionnel de santé. En cas d'ingestion d'un composant de Unica anterior Introkit, il est fortement recommandé de consulter un médecin et de localiser les composants ingérés. En cas de maladie suite à l'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Tous les produits réutilisables Polydentity sont fournis

en - ENGLISH

a l'état non stérile et doivent être correctement désinfectés, nettoyés et stérilisés avant leur première utilisation. Prière de se référer aux instructions de nettoyage, désinfection et stérilisation sur www.polydentity.ch

Élimination

Du fait de leur composition, les matrices et coins interdentaires ne sauraient être stérilisés et sont donc à usage unique. Ne pas les réutiliser. Éliminer de manière appropriée les dispositifs contaminés par des substances potentiellement infectieuses d'origine humaine, conformément aux dispositions locales.

Instructions for use

Selection des matrices Unica: Choisissez la matrice Unica en fonction de sa forme et de la dent à restaurer. ① Sélectionnez Unica anterior pour : les incisives centrales maxillaires, les incisives latérales maxillaires, les canines. ② Sélectionnez Unica minideep anterior pour : les latérales maxillaires et mandibulaires, les incisives centrales mandibulaires, les dents conoides, les dents triangulaires, les latérales rizomorphes, les dents à diamètre cervical étroit.

Comment positionner les matrices Unica: ③ Utilisez les ailettes de positionnement pour placer Unica de manière proximale. En cas de surfaces de contact étroites, insérez une ailette à la fois. ④ Tirez doucement la matrice vers le palais avec les ailettes de positionnement. ⑤ Poussez la connexion cervicale dans le sulcus gingival. ⑥ Insérez les coins interdentaires myWedge pour fixer la matrice en place.

Conseils et astuces: Fixez les matrices Unica avec une cuiller liquide lorsque le coin risque de déplacer ou de déformer la matrice. ⑦ Oui. ⑧ Non.

it - ITALIANO

Sistema Di Matrici

Tutti i singoli componenti sono marcati CE

Kit di Dispositivi medici solo per uso professionale

Istruzioni per l'uso

Descrizione

Selezionare las matrices Unica: Elija la matriz Unica en función de su forma y el diente a restaurar. ① Selección Unica anterior para : las incisivas centrales maxilares, las incisivas laterales maxilares, las caninas. ② Selección Unica minideep anterior para : las laterales maxilares y mandibulares, las incisivas centrales mandibulares, dientes conoides, dientes triangulares, dientes laterales rizomórficas, dientes a diámetro cervical estrecho.

Comment posicionar las matrices Unica: ③ Utilizar las aletas de posicionamiento para insertar Unica proximalmente. En caso de superficies de contacto estrechas, inserir una aleta a la vez. ④ Puxar suavemente a matriz plásica de las aletas de colocación en sentido palatino. ⑤ Empujar la conexión cervical dentro del surco gingival. ⑥ Insertar los coins interdentarios myWedge para fijar la matriz en su lugar.

Consejos e astuces: Fijar las matrices Unica con una cuchara líquida, caso en que la cuchara corre el riesgo de desplazar o deformar la matriz. ⑦ Sí. ⑧ No.

es - ESPAÑOL**Sistemas De Matrices**

Todos los componentes individuales llevan la marca CE

Kit de productos sanitarios solo para uso profesional

Instrucciones de uso

Descripción

Unica anterior y Unica minideep anterior pasan sich dank ihrer geschwungenen Form an die verschiedenen Morphologien der Frontzähne an und sind für die gleichzeitige Restaurierung der approximalen und zervikalen Ränder geeignet, selbst bei Vorhandensein von Kofferdamen oder Gingivale-Retraktionsfäden, was die Behandlungszeit erheblich reduziert. Darüber hinaus ermöglichen Unica anterior und Unica minideep anterior Matrizen nach ihrer Positionierung eine einfache Visualisierung der endgültigen Form der Restoration. Unica anterior & Unica minideep anterior ermöglichen Folgendes: Gleichzeitige Restaurierung der approximalen und zervikalen Ränder. Anatomische Restaurierung des zervikalen Bereichs. Einfaches Arbeiten im zervikalen Bereich.

Cómo posicionar las matrices Unica: ③ Utilice las aletas de posicionamiento para introducir Unica proximalmente. En caso de superficies de contacto estrechas, inserir una aleta a la vez. ④ Puxar suavemente la matriz hacia el paladar mediante las aletas de colocación. ⑤ Empuje la conexión cervical dentro del surco gingival. ⑥ Introduzca miWedge para fijar la matriz en su sitio.

Trucos y consejos: asegure las matrices Unica con una cuchara líquida, en caso de riesgo de que una cuchara desplace o deforme la matriz. ⑦ Sí. ⑧ No.

de - DEUTSCH**Matrizenysteme**



Alle Einzelkomponenten sind CE-markiert

Medizinprodukte-Set nur für profesionellen Bruck

Brucksanvisning**Beskrivning**

Unica anterior och Unica minideep anterior passar sig till olika morfolojier hos framre tänder och är avsedda att återställa interproximala och cervikala marginer

unica introkit

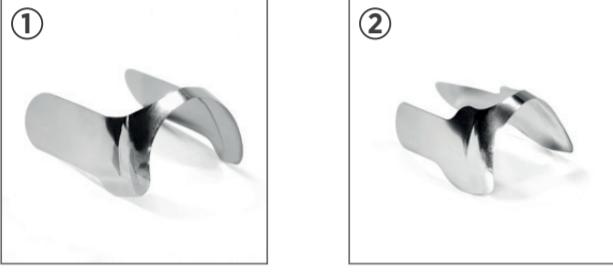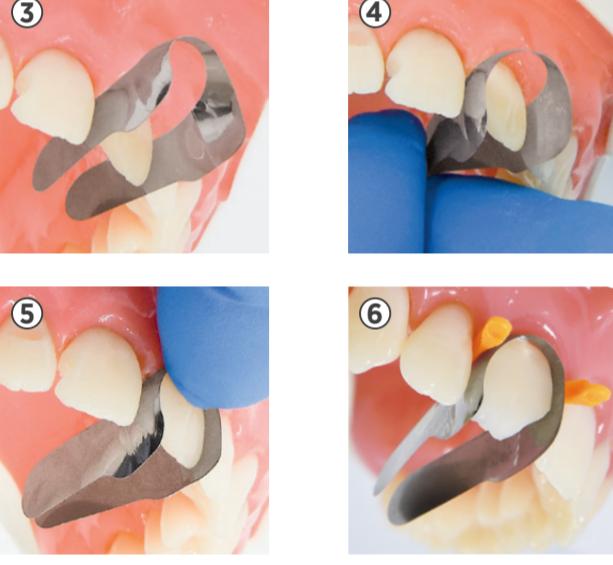in cooperation with **STYLE ITALIANO™****matrix**
systems**Select Unica matrices****How to position Unica matrices****Tips and tricks****da - DANSK**

Matricesystemer

Alle de enkelte komponenter er CE-mærkede

Medicinsk udstyrssæt til professionel brug alene

Brugsanvisning

Beskrivelse

Unica anterior og Unica minideep anterior tilpasser sig takket være deres konformerede form korrekt til de forskellige morfolojer af fortegner og er bereget til at genoprette interproksimale og cervikale marginer på én gang, selv ved tilstedsvarrelse af gummidamager eller tandkanthus, hvilket reducerer tiden i stolen betydeligt. Ydermere gør anterior- Unica- og anteriore Unica minideep-anterior matrixer – når de først er placeret – let at restaureringen den endelige form af restaureringen. Unica anterior og Unica minideep anterior gør det muligt at: Restaurere både prøksimale og cervikale marginer på én gang. Restaurera de prøksimale marginer takket være den konturerede profil, men håndterende af det cervikale område.

Sammensætning

Unica anterior og Unica minideep anterior: rustfrit stål | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps: rustfrit stål.

Indikationer

Unica anterior introkit er indikeret for: restaurering af klasse III-kaviteter, restaurering af klasse IV-kaviteter, restaurering af klasse V-kaviteter, komposit finer med direkte lagdeling, formmodifikationer.

Kontraindikationer

Ingen kendte kontraindikationer.

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger. Enhver alvorlig hændelse skal indberettes ved kontakte distributoren eller Polydentity.

Interaktioner med andet medicinsk udstyr og produkter

Der er ingen kendte interaktioner.

Information til patienten

Ingen information til patienten vedrørende Unica anterior Introkit er nødvendig.

Konserving og opbevaring

Opbevares på et ret, tørt sted på afstand af fugt eller kraftig luftfugtighed.

Advarsler

Pga. tilstedeværelsen af små og skarpe komponenter er det obligatorisk at anvende en kofferdam for at sikre patienten mod synkning eller inhalering. Søg omhendende læge, hvis der er del af Unica anterior Introkit bliver tilgængelig for patienten. Ved synkning af en del af Unica anterior Introkit afbefalettes det på det kraftigste at søge hjælpehjælp og lokalsuge sluge komponenter. Hvis du opstår sygdom efter indtagelse, skal der omgående seges læge. Alle Polydentity-produkter til flergangsbrug leveres som ikke-sterile, og da skal derfor desinficeres, rengøres og steriliseres korrekt inden første brug. Rengørings-, desinfektions- og steriliseringsanvisningerne på www.polydentity.dk skal gennemlæses.

Bortskaffelse

Pga. deres sammensætning kan matricerne og ilerne ikke sterilisieres, og de er derfor engangsudstyr. De må ikke genanvendes. Udstyr, der er kontamineret med potentiel smittefarlig agenser af human oprindelse, skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

Applikation

Vælg Unica-Matricer: Vælg Unica i overensstemmelse med dens form og den tand, der skal restaureres. ① Vælg Unica anterior for: maxillære centrale fortegner, maxillære laterale fortegner, højre/venstre. ② Vælg Unica minideep anterior for: maksillære og mandibulære lateraler, mandibulære centrale fortegner, koniske tænder, rektangulære tænder, plekkelerataler, tænder med små cervikale diameter.

Sådan Placeres Unica-Matricer: ③ Brug placeringssvingerne til at indsette Unica produkter. ④ Hvis der er fåtte kontaktflader indsettes en vinge ad gangen. ⑤ Brug forsigtigt matricen palatalt til at fastgøre Unica anterior. ⑥ Insert myWedge til at fastgøre matricen i positionen.

Tips Og Tricks: Fastgor Unica-matricer på plads med en væskebedæmning, hvis en kil risikerer at forskyde eller deformere matricen. ⑦ Ja. ⑧ Nej.

cs - ČEŠTINA

Matricové Systémy

Všechny jednotlivé součásti mají označení CE

Sada zdravotnických prostředků určená pouze pro profesionální použití

Návod k použití**Popis**

Unica Anterior a Unica Minideep Anterior se díky anatomickému tvaru jednoduše přizpůsobují různým morfoložickým frontálních Zubů a umožňují současnou rekonstrukci v Interproximální i cervikální oblasti, a to i při použití kofferdamu nebo retrakčního vlnáku, čímž se výrazně zlepšuje délka výkonné. Matrice Unica Anterior a Unica Minideep kromě toho umožňují po umístění snadnou vizualizaci konečného tvaru rekonstrukce. Unica Anterior a Unica Minideep Anterior umožňují současnou rekonstrukci v Interproximální i cervikální oblasti, anatomickou rekonstrukci proximální okrajů díky tvorovanému profilu, snadnou práci v cervikální oblasti.

Složení

Unica Anterior a Unica Minideep Anterior: nerezová ocel | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Indikace

Sada Unica Anterior Introkit je určena pro: Výplň kavít III. třídy, Výplň kavít IV. třídy, Výplň kavít V. třídy, Přímé kompozitní fazety podle stratifikačního protokolu, Úpravy tvaru.

Kontraindikace

Nejsou známé.

Vedlejší účinky

Není známo žádné známé vedlejší účinky. Případně závažné nežádoucí příhody hlasitě neprodleně distributoru nebo společnosti Polydentity.

Zájemné ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky

Nejsou známé žádné případy významného ovlivňování.

Informace pro pacienta

V současnosti se uvedla Unica anterior Introkit není nutné poskytovat pacientovi žádoucí informace.

Uchovávání a skladování

Uchovávajte na čistém, suchém místě a chráněte před vlhkem nebo příliš vysokou vlhkostí vzdachu.

Varování

Vzhledem k přitomnosti malých a ostrých součástí vždy použijte kofferdam, aby zabránilo různým skupinám nebo vzdachu. V případě náhodného vdechnutí nejakej komponente, když máte všechny komponenty v rukou, ihned vdechněte až do výdechu. Matrice Unica anterior a Unica minideep anterior Introkit používají vylehátku lehkou a lehkou, kterou můžete využít v případě vdechnutí.

Cestování

Unica anterior a Unica minideep anterior: nejedlé obaly | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Použití

Unica Anterior a Unica Minideep Anterior: nerezová ocel | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Uvádění

Unica Anterior Introkit je určena pro: Výplň kavít III. třídy, Výplň kavít IV. třídy, Výplň kavít V. třídy, Přímé kompozitní fazety podle stratifikačního protokolu, Úpravy tvaru.

Kontraindikace

Nejsou známé.

Vedlejší účinky

Není známo žádné známé vedlejší účinky. Případně závažné nežádoucí příhody hlasitě neprodleně distributoru nebo společnosti Polydentity.

Zájemné ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky

Nejsou známé žádné případy významného ovlivňování.

Informace pro pacienta

V současnosti se uvedla Unica anterior Introkit není nutné poskytovat pacientovi žádoucí informace.

Uchovávání a skladování

Uchovávajte na čistém, suchém místě a chráněte před vlhkem nebo příliš vysokou vlhkostí vzdachu.

Varování

Vzhledem k přitomnosti malých a ostrých součástí vždy použijte kofferdam, aby zabránilo různým skupinám nebo vzdachu. V případě náhodného vdechnutí nejakej komponente, když máte všechny komponenty v rukou, ihned vdechněte až do výdechu. Matrice Unica anterior a Unica minideep anterior Introkit používají vylehátku lehkou a lehkou, kterou můžete využít v případě vdechnutí.

Cestování

Unica anterior a Unica minideep anterior: nejedlé obaly | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Použití

Unica Anterior a Unica Minideep Anterior: nerezová ocel | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Uvádění

Unica Anterior Introkit je určena pro: Výplň kavít III. třídy, Výplň kavít IV. třídy, Výplň kavít V. třídy, Přímé kompozitní fazety podle stratifikačního protokolu, Úpravy tvaru.

Kontraindikace

Nejsou známé.

Vedlejší účinky

Není známo žádné známé vedlejší účinky. Případně závažné nežádoucí příhody hlasitě neprodleně distributoru nebo společnosti Polydentity.

Zájemné ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky

Nejsou známé žádné případy významného ovlivňování.

Informace pro pacienta

V současnosti se uvedla Unica anterior Introkit není nutné poskytovat pacientovi žádoucí informace.

Uchovávání a skladování

Uchovávajte na čistém, suchém místě a chráněte před vlhkem nebo příliš vysokou vlhkostí vzdachu.

Varování

Vzhledem k přitomnosti malých a ostrých součástí vždy použijte kofferdam, aby zabránilo různým skupinám nebo vzdachu. V případě náhodného vdechnutí nejakej komponente, když máte všechny komponenty v rukou, ihned vdechněte až do výdechu. Matrice Unica anterior a Unica minideep anterior Introkit používají vylehátku lehkou a lehkou, kterou můžete využít v případě vdechnutí.

Cestování

Unica anterior a Unica minideep anterior: nejedlé obaly | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Použití

Unica Anterior a Unica Minideep Anterior: nerezová ocel | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Uvádění

Unica Anterior Introkit je určena pro: Výplň kavít III. třídy, Výplň kavít IV. třídy, Výplň kavít V. třídy, Přímé kompozitní fazety podle stratifikačního protokolu, Úpravy tvaru.

Kontraindikace

Nejsou známé.

Vedlejší účinky

Není známo žádné známé vedlejší účinky. Případně závažné nežádoucí příhody hlasitě neprodleně distributoru nebo společnosti Polydentity.

Zájemné ovlivňování s jinými zdravotnickými prostředky nebo výrobky

Nejsou známé žádné případy významného ovlivňování.

Informace pro pacienta

V současnosti se uvedla Unica anterior Introkit není nutné poskytovat pacientovi žádoucí informace.

Uchovávání a skladování

Uchovávajte na čistém, suchém místě a chráněte před vlhkem nebo příliš vysokou vlhkostí vzdachu.

Varování

Vzhledem k přitomnosti malých a ostrých součástí vždy použijte kofferdam, aby zabránilo různým skupinám nebo vzdachu. V případě náhodného vdechnutí nejakej komponente, když máte všechny komponenty v rukou, ihned vdechněte až do výdechu. Matrice Unica anterior a Unica minideep anterior Introkit používají vylehátku lehkou a lehkou, kterou můžete využít v případě vdechnutí.

Cestování

Unica anterior a Unica minideep anterior: nejedlé obaly | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Použití

Unica Anterior a Unica Minideep Anterior: nerezová ocel | myWedge: termoplast myQuickmatrix Forceps; nerezová ocel.

Uvádění

Unica Anterior Introkit je určena pro: Výplň kavít III. třídy, Výplň kavít IV. třídy, Výplň kavít V. třídy, Přímé kompozitní fazety podle stratifikač