

disfrute sus restauraciones de clase II cotidianas

sectional
matrix
systems

myClip 2.0

myQuickmat
Forte kit

myQuickmat
Classico kit

myCustom
Rings kit
powered by Style Italiano

INNOVADORA TÉCNICA



polydentia
swiss manufacture 



www.polydentia.ch

myClip 2.0

Todo en uno
Anillo de matriz
seccional con
pinzas integradas



Testimonial



"myClip 2.0 es muy fácil de manipular. La geometría especial y la rigidez de sus extremos permite una adaptación eficaz en las paredes palatina/lingual y vestibular. De esta forma, se ahorra tiempo para los pasos de acabado y se garantiza una buena morfología proximal."

Dr. David Gerdolle,
Montreux - Suiza



Bibliografía

Cuñas de madera

Cuñas interdientales hechas de madera de arce de bosques suizos de gestión sostenible



Extremos

Extremos de plástico autoclavables y reemplazables



LumiContrast

Matrices de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios



Anillo de matriz seccional todo en uno con pinzas integradas que permite la colocación con una sola mano usando los dedos y sin pinzas especiales para anillo. Sus extremos autoclavables de plástico garantizan la perfecta adaptación de la matriz en las paredes palatina/lingual y vestibular, reduciendo así notablemente la necesidad de los pasos de acabado y, por tanto, permitiendo ahorrar tiempo. Estos extremos de forma anatómica son reemplazables y permiten beneficiarse de la larga vida útil del anillo de acero inoxidable de máxima calidad. La fuerza de separación de myClip 2.0 permite crear excelentes puntos de contacto en la restauración de las caries de clase II, lo que hace que sea ideal para todas las situaciones clínicas.

myClip 2.0 - REF 6305

- 1 ud. myClip 2.0,
- 2 pares de extremos

Matriz de prueba y set de cuñas incluido


- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 5 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 10 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS),
- 10 uds. Cuñas de madera, 12mm (S)



myQuickmat Forte kit



Sistema de matrices seccionales completo desarrollado para ofrecer una fuerte separación de los dientes

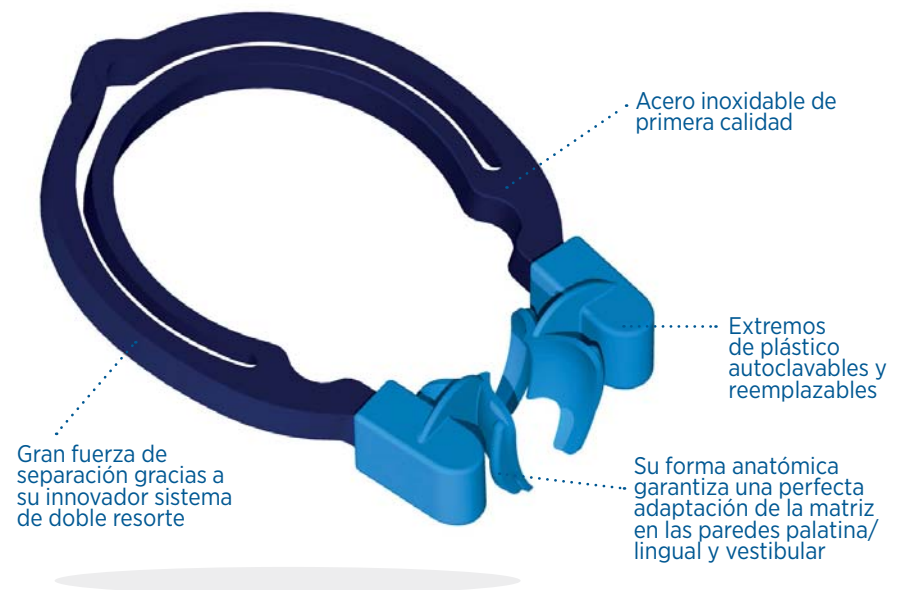

Testimonial



"El myQuickmat Forte kit proporciona un fuerte anillo de separación para separar los extremos con eficacia. Los extremos de myRing Forte rodean cuidadosamente la matriz y, en combinación con myWedge, garantizan una perfecta adaptación de la matriz y una restauración con fuertes puntos de contacto."

Dr. Giuseppe Chiodera,
Brescia - Italia



Bibliografía

Extremos

Extremos de plástico autoclavables y reemplazables



LumiContrast

Matrices de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios



myWedge

Cuña en forma de V hecha de plástico de última tecnología. Se comprime y se adapta a la perfección a la anatomía interproximal de los extremos



myForceps

myForceps es el instrumento indispensable para colocar y extraer con seguridad todos los anillos de matrices seccionales Polydentia



Este kit incluye myRing Forte, de Polydentia, un fuerte anillo de separación con una excelente fuerza de separación. Sus extremos autoclavables y reemplazables de plástico garantizan la perfecta adaptación de la matriz en las paredes palatina/lingual y vestibular. El kit incluye una selección de cuñas de plástico interdientales anatómicas de alta calidad myWedge. Su forma hueca en V le permite comprimirse y adaptarse a la anatomía interproximal de los extremos. Las matrices seccionales LumiContrast completan el surtido de matrices del kit. Estas matrices de color azul oscuro aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios.

myQuickmat Forte kit - REF 6803

- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm/5mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 2 uds. myRing Forte,
- 2 pares de extremos,
- 50 uds. myWedge, Extrasmall (XS),
- 50 uds. myWedge, Small (S),
- 40 uds. myWedge, Medium (M),
- 40 uds. myWedge, Large (L),
- 1 ud. myForceps



myQuickmat Classico kit

Sistema de matrices seccionales completo desarrollado para ofrecer una separación suave de los dientes



Testimonial



"myRing Classico aplica la presión perfecta para garantizar una adaptación y una retención óptimas de la matriz. No pierde su forma: su rendimiento mecánico es constante y no disminuye con el uso. Los Delta Tubes, con su nuevo rediseño y desarrollados por Style Italiano, proporcionan una versatilidad considerable para adaptar perfectamente la matriz seccional conforme a cada caso correspondiente."


Dr. Jordi Manauta, Italia



"Sin deformación de la matriz, incluso en caso de preparaciones amplias"



Bibliografía

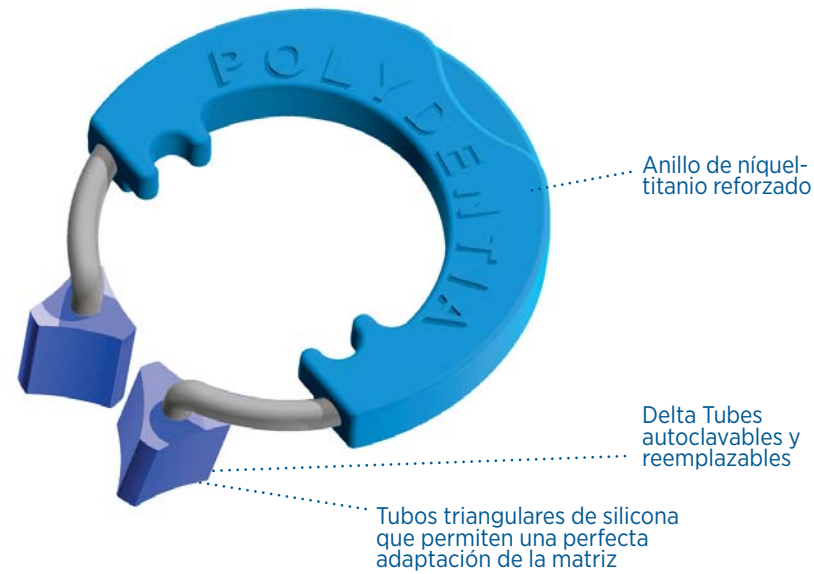

Anillo de níquel-titanio reforzado

Delta Tubes autoclavables y reemplazables

Tubos triangulares de silicona que permiten una perfecta adaptación de la matriz

Delta Tubes

Tubos de silicona con forma anatómica que garantizan una retención óptima de la matriz y una perfecta adaptación a la anatomía del diente



Matrices de acero

Para restauraciones cervicales subgingivales



LumiContrast

Matrices de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios



Cuñas de madera

Cuñas interdientales hechas de madera de arce de bosques suizos de gestión sostenible



Este kit incluye myRing Classico de Polydentia, un anillo de matriz seccional clásico hecho de níquel titanio. Está reforzado para brindar una fuerza de separación ideal y suave en combinación con las Cuñas interdientales hechas de madera de arce incluidas. El kit también incluye los recientemente rediseñados Delta Tubes. Estos tubos de silicona con forma anatómica garantizan una retención óptima de la matriz y una perfecta adaptación a la anatomía del diente. Las matrices seccionales LumiContrast completan el surtido del kit. Estas matrices de color azul oscuro aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios.

myQuickmat Classico kit - REF 6801

- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 50 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. Quickmat Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Premolar 0,04mm / 5mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Molar 0,04mm / 6,4mm,
- 20 uds. LumiContrast Matrices Seccionales, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.,
- 2 uds. myRing Classico,
- 6 pares de Delta Tubes,
- 50 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS),
- 50 uds. Cuñas de madera, 12mm (S),
- 40 uds. Cuñas de madera, 13mm (M),
- 40 uds. Cuñas de madera, 15mm (L)



myCustom Rings kit

INNOVADORA TÉCNICA




powered by
STYLE ITALIANO

Testimonial



"En casi todos los casos en los que los espacios proximales están sanos e intactos y existe el riesgo de perderlos, myCustom Ring es la mejor técnica para superar esta frecuente dificultad. Fácil de usar y fácil de producir, es una técnica estratégica para el día a día de la odontología adhesiva moderna."

Dr. Anna Salat, Italia

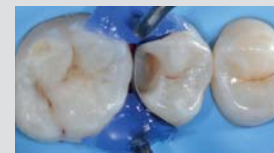


www.styleitaliano.org/my-custom-rings-kit



Anillo de níquel-titanio reforzado

Extremos con forma personalizada elaborados con resina fotopolimerizable myCustom Resin

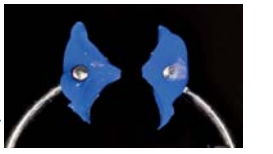

Los extremos personalizados permiten obtener fuertes puntos de contacto y un contorno proximal preciso durante la restauración

myCustom Resin

La forma de los extremos del anillo se personaliza tomando una impresión de las paredes proximales sanas e intactas usando la resina fotopolimerizable myCustom Resin incluida




LumiContrast

Matrices de color azul oscuro que aumentan significativamente el contraste y reducen el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios



Cuñas de madera

Cuñas interdientales hechas de madera de arce de bosques suizos de gestión sostenible

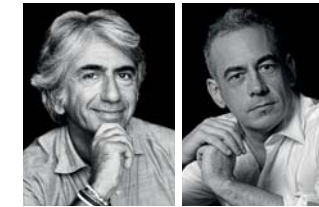

"La innovadora técnica que hay tras el myCustom Rings kit ejemplifica a la perfección nuestra filosofía: 'Viable, enseñable y repetible: la receta de Style Italiano para el éxito en el día a día del odontólogo'."

Prof. Angelo Putignano MD, DDS & Dr. Walter Devoto, DDS Fundador de Style Italiano -Italia

myCustom Rings kit se ha desarrollado en colaboración con Style Italiano, un grupo de estudio de odontólogos e investigadores especializados en odontología estética y restauradora. Este kit está concebido para la aplicación de una innovadora técnica desarrollada por el Dr. Jordi Manauta de Style Italiano. La técnica myCustom Rings permite recrear fácilmente la anatomía interproximal preexistente. La forma de los extremos del anillo se personaliza tomando una impresión de las paredes proximales sanas e intactas usando la resina fotopolimerizable myCustom Resin incluida. Esto permite obtener fuertes puntos de contacto y un contorno proximal preciso durante la restauración.

myCustom Rings kit - REF 6802

- 50 uds. Matrices Seccionales Quickmat, Premolar 0,025mm / 5mm,
- 50 uds. Matrices Seccionales Quickmat, Molar 0,025mm / 6,4mm,
- 20 uds. Matrices Seccionales LumiContrast, Premolar 0,025mm / 5mm,
- 20 uds. Matrices Seccionales LumiContrast, Molar 0,025mm / 6,4mm,
- 20 uds. Matrices Seccionales Transparentes Quickmat, Premolar 0,075mm / 5 mm,
- 20 uds. Matrices Seccionales Transparentes Quickmat, Molar 0,075mm / 6,4mm,
- 2 uds. myRing Classico,
- 6 pares de Delta Tubes,
- 50 uds. Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS), 50 uds. Cuñas de madera, 12mm (S),
- 40 uds. Cuñas de madera, 13mm (M), 40 uds. Cuñas de madera, 15mm (L),
- 1 myCustom Resin, jeringa de 3 ml con 10 puntas de jeringa de calibre 18 para myCustom Resin



myWedge

myWedge es una cuña interproximal hecha de plástico de última tecnología. Su innovadora forma hueca en V le permite comprimirse y adaptarse a la anatomía interproximal de los dientes. Evita que la papila resulte dañada a la vez que guía y da a la banda matriz la forma anatómica del área cervical del diente. La exclusiva geometría del cabezal redondo de myWedge ha sido diseñada para la fácil manipulación, colocación y extracción de la cuña con cualquier pinza estándar.


- Innovadora forma hueca en V
- Cabezal sujeto para evitar deslizamientos
- Colores llamativos para una fácil identificación



LumiContrast

Las matrices seccionales LumiContrast son de color azul oscuro, lo que aumenta significativamente el contraste y reduce el efecto de deslumbramiento, especialmente durante el uso de lupas o microscopios.

- Alto contraste
- Bajo reflejo
- Ideal durante el uso de lupas o microscopios

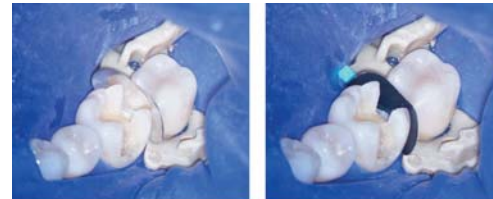

Sin LumiContrast

Con LumiContrast

myQuickmatrix Forceps

myQuickmatrix Forceps garantiza un agarre firme de la matriz al posicionarla y/o extraerla tras la restauración.

- Para una fácil manipulación de la matriz
- Puntas con nervaduras especiales para una sujeción firme
- Puntas resistentes de carbono de tungsteno



myForceps

myForceps es el instrumento indispensable para colocar y extraer con seguridad todos los anillos de matriz seccionales de Polydentia, como myRing Classico y myRing Forte. La forma de las puntas garantiza un agarre firme del anillo durante la aplicación.

- Para una fácil aplicación de myRing Classico y myRing Forte
- Fuerte y resistente
- Excelente calidad



Repuestos del kit



Anillos para matrices seccionales

REF 6805 myClip 2.0 2 uds., Extremos 2 pares	REF 6804 myRing Classico 2 uds., Delta Tubes 2 pares	REF 6806 myRing Forte 2 uds., Extremos 2 pares	REF 6303 8 pares Extremos para myClip 2.0 y myRing Forte	REF 5712 15 pares Delta Tubes

Matrices de acero		Cantidad	REF
	Matrices Seccionales Quickmat, Premolar 0,025mm / 5mm	100	5735
	Matrices Seccionales Quickmat, Molar 0,025mm / 6,4mm	100	5736
	Matrices Seccionales Quickmat, Premolar 0,04mm / 5mm	100	5705
	Matrices Seccionales Quickmat, Molar 0,04mm / 6,4mm	100	5706
	Matrices Seccionales Quickmat, Ampliadas 0,025mm / 6,4mm+Ampl.	50	5756
	Matrices Seccionales Quickmat, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.	50	5746

Matrices transparentes		Cantidad	REF
	Matrices Seccionales Transparentes Quickmat, Premolar 0,075mm / 5mm	100	5765
	Matrices Seccionales Transparentes Quickmat, Molar 0,075mm / 6,4mm	100	5766
	Matrices Seccionales Transparentes Quickmat, Ampliadas 0,075mm / 6,4mm+Ampl.	50	5776

Matrices LumiContrast		Cantidad	REF
	Matrices Seccionales LumiContrast, Premolar 0,025mm / 5mm	70	6735
	Matrices Seccionales LumiContrast, Molar 0,025mm / 6,4mm	70	6736
	Matrices Seccionales LumiContrast, Premolar 0,04mm / 5mm	70	6705
	Matrices Seccionales LumiContrast, Molar 0,04mm / 6,4mm	70	6706
	Matrices Seccionales LumiContrast, Ampliadas 0,025mm / 6,4mm+Ampl.	50	6756
	Matrices Seccionales LumiContrast, Ampliadas 0,04mm / 6,4mm+Ampl.	50	6746

Cuñas		Cantidad	REF
	Cuñas de madera Pinky, 11mm (XS)	200	5011
	Cuñas de madera, 12mm (S)	100	5012
	Cuñas de madera, 13mm (M)	100	5013
	Cuñas de madera, 15mm (L)	100	5015
	myWedge, Extrasmall (XS)	100	7101
	myWedge, Small (S)	100	7102
	myWedge, Medium (M)	100	7103
	myWedge, Large (L)	100	7104

Resina		REF
myCustom Resin, jeringa de 3 ml y 10 puntas de jeringa de calibre 18		6811

Pinzas		REF
myQuickmatrix Forceps		5703
myForceps		5707

let's keep connected



REV 02.09.2017



Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch

